





Pojemnik UROX		S M L XL	Bezpieczna zbiórka moczu. Skóra pozostaje sucha. Łatwy do zakładania i zdejmowania.
UROX 600 ml Ochraniacz na nogę		S M L XL	Łatwy i wygodny w użyciu Anatomiczny kształt. Dyskretny kurek zabezpieczony przed przypadkowym odkręceniem.
UROX Bokserki		S M L XL XXL	Bokserki ze specjalnie zaprojektowanym rozporciem, żeby podtrzymywać pojemnik i rurkę we właściwym położeniu. Żadnych niewygodnych szwów z tyłu.
UROX Płyn do płukania		250 ml 500 ml	Płyn do płukania, żeby zwalczać bakterie i nieprzyjemne zapachy

UROX można nabyć w sklepie internetowym na [www.UROX.com](http://www.UROX.com) albo u swojego lokalnego dealera.

UROX jest produkowany przez:  
Urologic ApS, Gershojvej 4, 4070 Kirke Hyllinge, Dania  
E-mail: [urox@urox.com](mailto:urox@urox.com)

# UROX

## Nowy sposób zbiórki moczu




[www.UROX.com](http://www.UROX.com)

## Co to jest UROX?

UROX jest całkowicie nowym systemem do zbiórki moczu dla mężczyzn.

UROX pozwoli ci prowadzić nadal aktywny tryb życia mimo nietrzymania moczu albo częstego oddawania moczu. System składa się z trzech części:

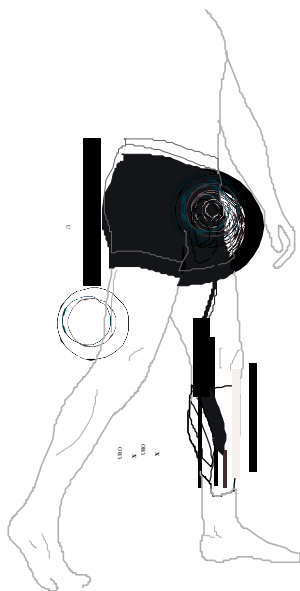

- Zakończoną rurką elastycznego pojemnika dopasowanego do penisa.
  - Bokserki podtrzymujących pojemnik.
  - Rozciągliwego ochraniacza na nogę z wbudowanym workiem na mocz.
- System należy myć specjalnie do tego przeznaczonym płynem do płukania, aby przeciwdziałać namnażaniu się bakterii

i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

## Kto może korzystać z UROX?

- Mężczyźni cierpiący na częste mikcje - np. wskutek powiększonej prostaty, leczenia albo słabego pęcherza.
- Mężczyźni wykonujący prace albo mający hobby w czasie których załatwienie potrzeby może być trudne, np.: kierowcy autobusów, piloci szybowców, ludzie praktykujący religijnie, nauczyciele i każdy, komu grozi, że przez pewien dłuższy czas będzie musiał się powstrzymać i będzie z tego powodu odczuwać dyskomfort.
- Mężczyźni cierpiący na nietrzymanie moczu - np. pacjenci ze stwardnieniem rozsianym, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, na wózkach inwalidzkich i mężczyźni, którzy przeszli operację prostaty.

## Niedrogi w użyciu

System jest tak odporny, że wytrzyma codzienne używanie i jest tak dyskretny, że może być noszony pod zwykłym ubraniem bez obawy, że ktoś z zewnątrz go zauważy. System, jeśli jest konserwowany właściwie, może być wielokrotnie używany. Specjalnie przeznaczony do tego płyn do płukania redukuje nieprzyjemne zapachy i namnażanie się bakterii. Nie uszkadza on delikatnej membrany, instalacji i zastawki.

## System UROX

Oddajesz mocz do pojemnika. Za pierwszym razem może to wydawać się trochę dziwne, ale przyzwyczaisz się do tego szybko. Z pojemnika mocz sływa przez rurkę do ochraniacza na nogę, gdzie jest on zbierany do wbudowanego worka. Worek jest opróżniany wtedy, kiedy ci wygodnie. Wystarczy przekręcić mały kurek.



Pojemnik przylega do pachwiny mniej więcej tak, jak ochraniacz na pachwinę noszone w wielu dyscyplinach sportowych. Jest on zrobiony z elastycznego plastiku i tak zaprojektowany, aby naśladować kształt ciała zachowując miejsce na powietrze

wokół penisa, żeby skóra pozostała sucha. Od strony stykającej się z ciałem pojemnik jest mocowany z użyciem cienkiej silikonowej membrany.

Membrana przylega dokładnie do penisa, ale nie uciska go. Bokserki UROX podtrzymują pojemnik. Bokserki również pomagają skierować rurkę pod odpowiednim kątem do ochraniacza na nogę. Dzięki temu możesz oddawać mocz siedząc, bez obawy, że mocz się cofnie wskutek zaplątanej rurki.

Ochraniacz na nogę przylega do dolnej części lewej nogi. Jest on zrobiony z rozciągliwego materiału, w wykroju, który ściśle przylega do łydki. Worek jest wbudowany w ochraniacz i jest umieszczony z przodu golenia, gdzie jest najwygodniej go nosić.

Kurek wylotowy umieszczony u dołu worka jest podwiązany do góry i umocowany z boku ochraniacza, gdy nie jest używany. W ten sposób jest on niewidoczny pod spodniami i kurek jest zabezpieczony przed przypadkowym odkręceniem.

Pojemnik, ochraniacz na nogę i bokserki są dostępne w różnych rozmiarach, aby zapewnić najwyższy komfort i bezpieczeństwo.